



ENDYMED
3DEEP SKIN SCIENCE

A REVOLUÇÃO é 3 DEEP

Certificação Médica

Plataformas

ENDYMED PRO / PURE

Microagulhamento e Microablação
por Radiofrequência Fracionada
aliada à Radiofrequência Resistiva

ENDYMED

Desde 2007, EndyMed Medical, tornou-se uma empresa líder no mercado cirúrgico, dermatológico e medicoestético graças ao seu método patenteado de emissão radiofrequencial para múltiplas camadas da pele **3DEEP®**, integrado nos equipamentos **ENDYMED PRO e PURE**.

3DEEP é o único sistema clinicamente comprovado que aquece a derme a 52-55°C, mantendo a epiderme abaixo de 40-42°C. Esse processo estimula a neogênese e a angiogênese, contrai as fibras de colagénio e reativa os mecanismos de reparação celular, promovendo o aumento e a melhoria da atividade fibroblástica.

As plataformas ENDYMED PRO e PURE dispõem de 15 programas e até 7 emissores, cuja combinação personalizada garante resultados rápidos e duradouros para o rosto e o corpo, com mínima necessidade de recuperação, maximizando o retorno sobre o investimento.

Os equipamentos de elite **ENDYMED 3DEEP** são únicos na sua classe, sendo amplamente selecionados por dermatologistas e especialistas em medicina estética, que valorizam a excelência em rejuvenescimento e tratamento da pele.


A sua exclusividade, sustentada por resultados excepcionais, segurança comprovada e elevado nível de conforto, posiciona as plataformas **ENDYMED 3DEEP** como um poderoso diferencial de marketing, assegurando inovação tecnológica e uma experiência de cuidados de alta gama, apoiada por evidências científicas.



3DEEP[®]

Energia de multigeradores,
controlada em cada fase

A tecnologia patenteada **3DEEP** utiliza campos de energia radiofrecuencial, de 6 geradores, para provocar um aquecimento controlado tridimensional volumétrico, na área tratada, alcançando até 9mm de profundidade na pele, superando significativamente a RF convencional.

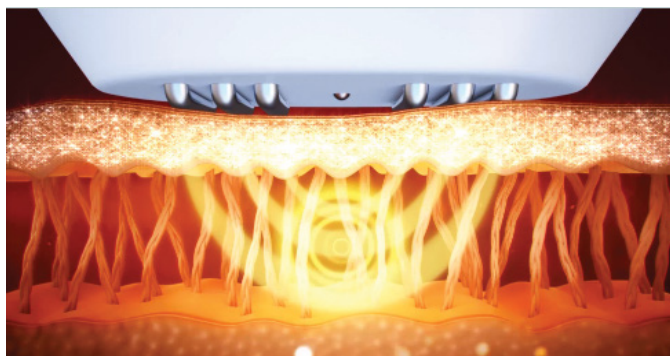

Desempenho ímpar

As forças de repulsão entre os campos eletromagnéticos direcionam a energia verticalmente para o tecido-alvo, minimizando a intensidade que chega à superfície da pele. A interação entre os 6 geradores concentra a emissão energética, de forma controlada, na derme e hipoderme.

Segurança e eficácia sem dor

Para garantir a máxima eficácia e segurança do procedimento, todos os manipuladores emissores 3DEEP possuem um sensor de impedância integrado, que mede constantemente a resistência da pele, ajustando automaticamente a intensidade da energia aplicada na área tratada. Este sistema inteligente de feedback assegura um tratamento indolor, sem a necessidade de arrefecimento adicional.

Credibilidade, clinicamente comprovada

Para garantir a máxima eficácia e segurança do procedimento, todos os manipuladores emissores 3DEEP possuem um sensor de impedância integrado, que mede constantemente a resistência da pele, ajustando automaticamente a intensidade da energia aplicada na área tratada. Este sistema inteligente de feedback assegura um tratamento indolor, sem a necessidade de arrefecimento adicional.

As plataformas ENDYMED PRO e PURE dispõem de 15 programas e até 7 emissores, cuja combinação personalizada garante resultados rápidos e duradouros para o rosto e o corpo, com mínima necessidade de recuperação, maximizando o retorno sobre o investimento.

ENDYMED 3DEEP | PRO

Resultados de nível cirúrgico com a segurança e conveniência de um tratamento não invasivo.

Plataforma multifuncional que suporta o uso de 4 tecnologias, por meio de 7 manípulos intercambiáveis, permitindo desde o rejuvenescimento delicado da zona periorbital até o contorno corporal profundo, tudo com um único equipamento.

Intensif - Modelagem, lifting, tratamento e reestruturação dermoepidérmica por microagulhamento com radiofrequência fracionada.

FSR – Microablação epidérmica não invasiva com RF fracionada

Radiofrequência Focada TC – aquecimento volumétrico tridimensional homogêneo e controlado

Contour – redução de celulite, flacidez e adiposidade localizada, remodelamento do contorno corporal.

- À medida que a ENDYMED 3DEEP PRO aumenta a taxa de utilização, é possível expandir as opções de tratamento com a adição de novos manípulos.
- Os manípulos TC de Radiofrequência Focada não requerem consumíveis
- O custo das ponteiros Intensif e FSR assegura alta rentabilidade e um rápido retorno sobre o investimento (ROI).
- O ecrã tátil e o software intuitivo facilitam ao máximo a operação da plataforma para o utilizador.
- Cada programa dispõe de parametrizações específicas para diferentes áreas e tipos de patologias a serem tratadas, fundamentadas em estudos clínicos.
- Os parâmetros podem ser ajustados conforme as necessidades clínicas e os objetivos terapêuticos de cada tratamento.

Características técnicas:

Potência máxima: 85 W

Frequência: 1MHz

Interface: Ecrã LCD tátil

Sistema de arrefecimento: água

Dimensões: 115x30x90 cm

Peso: 33 kg

Parâmetros do manípulo Intensif:

Profundidade de atuação: 0,1 – 5mm

Duração do impulso: 50 – 200 ms

Potência: 1 – 85 W

Parâmetros do manípulo FSR:

Duração do impulso: 0,1 – 0,6 seg.

Potência: 1 – 6 W



ENDYMED 3DEEP | PRO

Sistema integrado de feedback e segurança interativos:

Sensor de contato: garante a emissão de energia exclusivamente quando há contato total entre os elétrodos e a área tratada, assegurando a eficiência e segurança da aplicação.

Sensor de movimento: a emissão de energia é ativada apenas durante o movimento do manípulo, prevenindo a aplicação estática e excessiva de energia.

Sensor de impedância: realiza a calibração automática dos parâmetros de energia com base na impedância da pele na área tratada, otimizando a eficácia do tratamento.

Sensor de temperatura: monitoriza a temperatura da pele e ativa-se automaticamente quando a temperatura excede 45°C, garantindo a segurança térmica durante o procedimento.

A combinação exclusiva de alta potência, controlo inteligente de feedback e tecnologia de RF com múltiplos modos de emissão, torna o ENDYMED 3DEEP PRO num dispositivo excecionalmente eficaz, capaz de superar os sistemas de RF mono e multipolares atuais, tanto em termos de resultados clínicos quanto de conforto para o paciente.

Isso possibilita converter clientes que recorrem a métodos de RF alternativos, em clientes fiéis do ENDYMED 3DEEP PRO.

ENDYMED 3DEEP|PURE

Plataforma medicoestética de alto desempenho, ideal para espaços reduzidos.

O **ENDYMED PURE** é o êxito da engenharia médica, que integra as exclusivas características e eficácia da tecnologia 3DEEP, num design compacto e elegante, adaptável a qualquer ambiente, desde mediSPAs de alto padrão até consultórios dermatológicos de grande rotação.

A sua intuitiva interface e os parâmetros clinicamente testados, tornam o aparelho extremamente fácil de usar. O sistema de manípulos personalizáveis permite a expansão dos serviços conforme a sua prática cresce, sem a necessidade de aquisição de equipamentos adicionais, otimizando o espaço e a eficiência operacional.

O ENDYMED PURE suporta o uso de 3 tecnologias, por meio de 6 manípulos intercambiáveis, permitindo desde o rejuvenescimento delicado na área periorbital e perioral até o remodelamento corporal, tudo com um único equipamento.

INTENSIF - Remodelamento, lifting, tratamento e reestruturação dermoepidérmica por microagulhamento com radiofrequência fracionada.

FSR – Microablação epidérmica não invasiva com RF fracionada

Radiofrequência Focada – aquecimento volumétrico tridimensional homogêneo e controlado

Características técnicas:

Potência máxima: 65 W

Frequência: 1MHz

Fonte de alimentação: 220-240 V AC, 1A, 50-60 Hz

Interface: Ecrã LCD tátil

Sistema de arrefecimento: ar

Dimensões: 60 x 30 x 36,5 cm

Peso: 10,7 kg

Parâmetros do manípulo Intensif:

Profundidade de atuação: 0,1 – 3,5mm

Duração do impulso e potência: 6 níveis de parâmetros predefinidos

Parâmetros do manípulo FSR:

Duração do impulso e potência: 6 níveis de parâmetros predefinidos



ENDYMED 3DEEP | PURE

Sistema integrado de feedback e segurança interativos:

Sensor de contato: garante a emissão de energia exclusivamente quando existe contato total entre os elétrodos e a área tratada, assegurando a eficiência e segurança da aplicação.

Sensor de movimento: a emissão de energia é ativada apenas durante o movimento do manípulo, prevenindo a aplicação estática e excessiva de energia.

Sensor de impedância: realiza a calibração automática dos parâmetros de energia com base na impedância da pele na área tratada, otimizando a eficácia do tratamento.

Sensor de temperatura: monitoriza a temperatura da pele e ativa-se automaticamente quando a temperatura excede 45°C, garantindo a segurança térmica durante o procedimento.



VANTAGENS PARA INVESTIDORES

Benefícios educacionais

- Formação inicial e contínua, ministrada por profissionais de saúde e médicos especializados
- Oportunidade de participar em academias e palestras nacionais e internacionais, presenciais ou digitais, com foco na troca de protocolos e análise de casos clínicos relacionados ao tratamento com ENDYMED 3DEEP
- Expansão da rede de contatos profissionais nas áreas da medicina estética, dermatologia, cirurgia plástica e estética avançada.

Estética Avançada

- A crescente demanda por tratamentos com microagulhamento RF fracionado e outras técnicas de correção estética rápida, segura e eficaz, sem necessidade de período de recuperação, torna as plataformas ENDYMED 3DEEP num investimento sólido e de retorno garantido
- A elevada rentabilidade dos serviços, a ausência de sazonalidade e a alta frequência de tratamentos contribuem para a recuperação do investimento num período de 6 a 12 meses
- A versatilidade das aplicações aumenta o valor investido por cliente

Benefícios na interação com clientes

- A personalização excecional dos protocolos maximiza a eficácia e reduz o número de sessões necessárias
- O elevado nível de satisfação com os resultados potencia a fidelização e a divulgação espontânea
- A diversidade de indicações amplia o público-alvo
- A combinação com serviços invasivos e não invasivos eleva o nível de satisfação geral com resultado obtido

ENDYMED 3DEEP | PRO e PURE

VANTAGENS PARA INVESTIDORES

Benefícios de comunicação e marketing

- As tecnologias de ponta integradas nas plataformas ENDYMED 3DEEP aumentam a confiança e o reconhecimento do espaço no mercado
- Materiais de comunicação atrativos e inovadores facilitam a divulgação do espaço tanto no meio digital quanto offline
- A eficácia e segurança, comprovadas por diversos testes clínicos e por *Key Opinion Leaders* (KOLs), tornam as plataformas ENDYMED 3DEEP mais eficazes na criação de parcerias com figuras públicas.

Proteção do seu investimento

A segurança do seu investimento é garantida pela parceria com a Sorisa SA, distribuidor exclusivo da marca ENDYMED, líder nacional há 45 anos nos segmentos de saúde, estética e bem-estar.

A Sorisa disponibiliza, sem custos adicionais, todo o apoio necessário, prestado por uma equipa multifacetada, incluindo:

- Formação técnica e comercial inicial e contínua
- Desenvolvimento de plano de marketing e comunicação
- Elaboração do plano de negócios e ROI
- Estruturação de menu de serviços
- Apoio nos eventos de lançamento
- Apoio contínuo assegurado pelo gestor comercial e de marketing dedicado
- Assistência técnica e pós-venda especializada
- Fornecimento contínuo de consumíveis associados

MEDICINA ESTÉTICA

- Melhora a integridade da barreira protetora da pele
- Otimiza a qualidade e densidade tecidual
- Reestrutura e uniformiza a textura da pele
- Fortalece a estrutura dérmica
- Reduz a inflamação crónica da pele
- Melhora a vascularização e a oxigenação dos tecidos
- Diminui a necessidade de grandes volumes de preenchedores
- Otimiza a distribuição e fixação de preenchedores
- Complementa o efeito resurfacing de lasers e peelings
- Ideal em combinação com HiFu
- Incrementa frequência das visitas e fidelização dos clientes
- Minimiza o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória
- Evita a acumulação irregular de preenchedores
- Diminui o risco de fibroses e cicatrizes hipertróficas
- Diminuição da inflamação e do edema pós-procedimento
- Alcança áreas de difícil tratamento (pálpebras, pescoço, mãos)
- Rejuvenescimento periorbital, perioral e cervical (pescoço e da região submandibular)
- Aperfeiçoa e prolonga os resultados dos injetáveis
- Harmoniza a área tratada
- Ideal em combinação com procedimentos abrasivos (Lasers).

CIRURGIA PLÁSTICA

- Melhora a integridade da barreira protetora da pele
- Otimiza a qualidade e densidade tecidual
- Reestrutura e uniformiza a textura da pele
- Fortalece a rede de suporte dérmica
- Melhora a vascularização e a oxigenação dos tecidos
- Melhora a adesão e recuperação da pele após a cirurgia
- Acelera a regeneração e remodelamento cicatricial
- Reduz fibroses e irregularidades na pele
- Corrige imperfeições pós-cirúrgicas
- Promove efeito analgésico e anti-inflamatório
- Aprimora resultados cirúrgicos a longo prazo

SEGMENTOS DE ATIVIDADE

DERMATOLOGIA

- Melhora a integridade da barreira protetora da pele
- Estímulo de neocolagénese e remodelamento da matriz extracelular
- Melhora a textura e tonicidade cutânea
- Correção de cicatrizes e irregularidades cutâneas
- Controlo da produção sebácea e redução de poros dilatados
- Tratamento coadjuvante do melasma
- Melhora a hiperpigmentação pós-inflamatória
- Recuperação pós-procedimentos dermatológicos
- Aplicações em indicações dermatológicas específicas:
 - o Alopecia
 - o Rosácea
 - o Acne
 - o Rejuvenescimento periorbital, perioral e cervical (pescoço e da região submandibular)
 - o Reparação da pele fotodanificada
 - o Hiperidrose
 - o Estrias

ESTÉTICA AVANÇADA


- Correção das alterações na fase pré-envelhecimento (controlo de oleosidade, desidratação, desvitalização, disfunções da barreira cutânea)
- Tratamento abrangente do envelhecimento (Melhoria da flacidez, rugas, redefinição dos contornos)
- Redução dos sinais de stress oxidativo e inflamação celular crónica (textura e tom irregular, desvitalização, hipo/hiperpigmentação, poros dilatados, desidratação, sensibilidade)
- Reparação da pele fotodanificada
- Rejuvenescimento específico de áreas sensíveis: zonas periorbitais, periorais, de pescoço e da região submandibular (duplo queixo)
- Redução de cicatrizes e estrias
- Redução da celulite e adiposidade localizada
- Remodelamento do contorno corporal

RESULTADOS ESPERADOS NO ROSTO

- Reestruturação dérmica: refirmação, redensificação e efeito lifting facial
- Atenuação de rugas estáticas e dinâmicas, incluindo rítidas superficiais e profundas
- Revisão cicatricial: melhoria das cicatrizes hipo e hipertróficas, incluindo lesões pós-acne
- Modulação da melanogénese: redução de hiper e hipopigmentação
- Regulação vascular: atenuação dos sinais clínicos da rosácea
- Redução da dilatação dos poros pilossebáceos
- Homeostase epidérmica: uniformização da textura, do tom e radiância cutânea
- Otimização da matriz extracelular: incremento da elasticidade e tonicidade dérmica
- Contorno facial: redefinição da linha mandibular, pescoço e redução da adiposidade submental
- Rejuvenescimento periorbital: tratamento integral da região orbicular, incluindo pálpebras superior e inferior, fixas e móveis
- Rejuvenescimento perioral: redução de linhas finas, rugas periorais e de marionete, melhoria do contorno labial

RESULTADOS ESPERADOS NO CORPO


- Redução da celulite e da adiposidade localizada
- Remodelamento tecidual e aumento da firmeza cutânea
- Remodelamento do contorno corporal
- Revisão de cicatrizes e estrias
- Tratamento de zonas pequenas (mãos, cotovelos, joelhos, dedos)
- Diminuição de edemas
- Melhoria da circulação linfática
- Tratamento da hiperidrose
- Tratamento da Alopecia

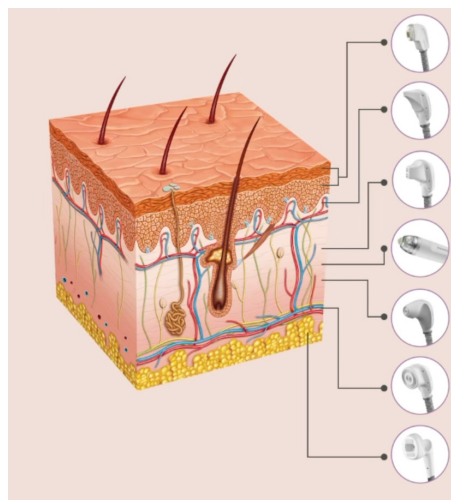

0.15/2.9mm		FSR
1.5mm		iFine
4mm		Small
5mm		Intensif
7mm		Mini-Shaper
11mm		Shaper
11+15mm		Contour

ENDYMED 3DEEP®


Emissão RF Bi e
multipolar: 1 gerador

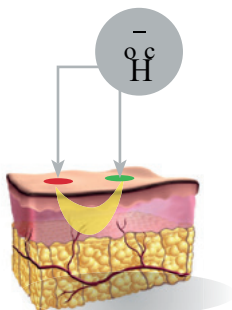

Aquecimento controlado mas
pouco eficaz.

Consequência: Eficácia reduzida
devido à atuação superficial em
tempo insuficiente


Emissão RF
Monopolar: 1 gerador

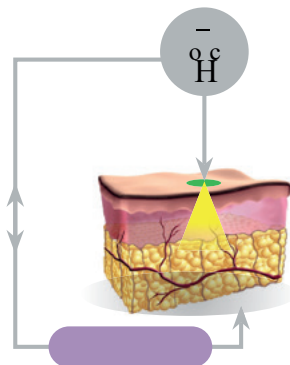

Aquecimento eficiente, sem controle.

Consequência: sobreaquecimento
tecidual, risco de queimaduras,
necessidade de arrefecimento, eficácia
comprometida.

3DEEP®: 6 geradores

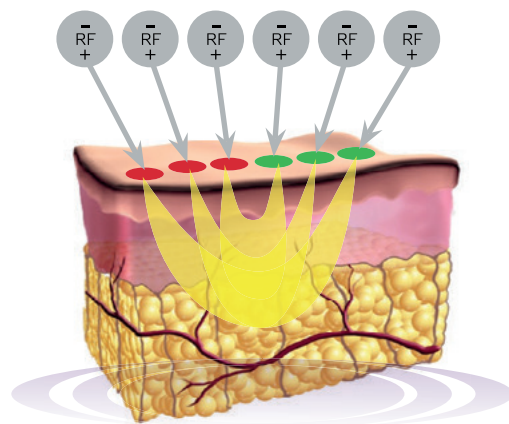

Distribuição direcionada e controlada da
energia na área alvo do tratamento, sem
sobreaquecimento da epiderme.

Aquecimento volumétrico e uniforme da
derme, na profundidade necessária para
alcançar o máximo efeito clínico.


Consequência: mais alto nível de segurança
e eficácia do procedimento, sem efeitos
colaterais.

3DEEP®: 3 Modos de Emissão



TC (tip control)

Única tecnologia RF
cl clinicamente comprovada
que aquece a derme a
50°-55°, atingindo o efeito
termoestimulante máximo, sem
superar 40°-42° na epiderme.

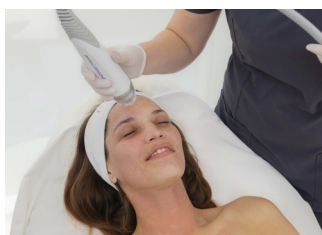

INTENSIF

Realiza microagulhamento
fracionado não ablativo,
liberando energia RF
diretamente na derme, em
volume terapêutico otimizado,
com mínimo impacto na
epiderme, estimulando
a produção intensiva de
colagénio e elastina.



FSR

Microablação epidérmica
não invasiva com RF
fracionada

Combina ação ablativa
fracionada e regenerativa com
RF no rosto e corpo, atuando
de forma eficaz em diferentes
camadas da pele.

VERSATILIDADE SEM LIMITES

As plataformas EndyMed 3DEEP PRO e PURE unem, de forma única, até 4 tecnologias fracionadas e não fracionadas num sistema universal, potencializando ao máximo o retorno do investimento.

Microagulhamento por Radiofrequência

Tecnologia avançada de microagulhamento RF fracionado não ablativo, proporcionando conforto e resultados otimizados.



Tecnologia de vácuo pulsado

A tecnologia de vácuo pulsado modulada garante uma indução térmica mais profunda, promovendo resultados superiores sem a necessidade de sistema de arrefecimento.



3DEEP TECNOLOGIA BASE

Única tecnologia que utiliza simultaneamente 6 geradores de radiofrequência, garantindo total controlo e segurança em cada fase da emissão



Radiofrequência Focada TC

A energia atinge as camadas mais profundas da derme, proporcionando aquecimento volumétrico homogêneo e controlado, na profundidade ideal para maximizar os efeitos terapêuticos clínicos.



Microablação epidérmica não invasiva com RF fracionada

Único aplicador no mercado com funcionalidade para ablação fracionada e aquecimento por radiofrequência 3DEEP. A avaliação contínua garante o controlo total na eliminação precisa das células epidérmicas, promovendo ainda uma indução térmica volumétrica otimizada.

INTENSIF

Destinado ao tratamento não ablativo de microagulhamento com radiofrequência fracionada, na pele do rosto e corpo. Procedimentos com este manípulo requerem o uso de ponteiros estéreis descartáveis, fornecidas em pacotes de 10 unidades.



VANTAGENS

A tecnologia de microagulhamento com radiofrequência fracionada transmite energia de forma controlada e em volume terapêutico otimizado para a derme, induzindo um estímulo profundo à neoformação de colagénio e à reorganização da matriz extracelular

Tecnologia FPM - fracionado Pulse Mode (modo fracionado pulsado):

- Ampla zona de coagulação ao longo da microagulhas
- Distribuição uniforme de energia na derme
- Manutenção da potência do impulso independentemente da resistência da pele
- Rápida recuperação e sensação de dor diminuta
- As microagulhas finas de 127 micrómetros e o uso de 1 - 4 passagens na área tratada minimizam os danos à epiderme, reduzindo o período de recuperação após o procedimento
- Agulhas não isoladas revestidas a ouro


SEGURANÇA

- A correção automática do impulso garante um aquecimento uniforme e seguro
- Inserção motorizada e dinâmica de agulhas
- A coagulação completa ao longo das agulhas diminui o risco de hematomas, contusões e HIP (hiperpigmentação pós-inflamatória).



Escolha a excelência ENDYMED

93% dos pacientes repetem o tratamento com Intensif.

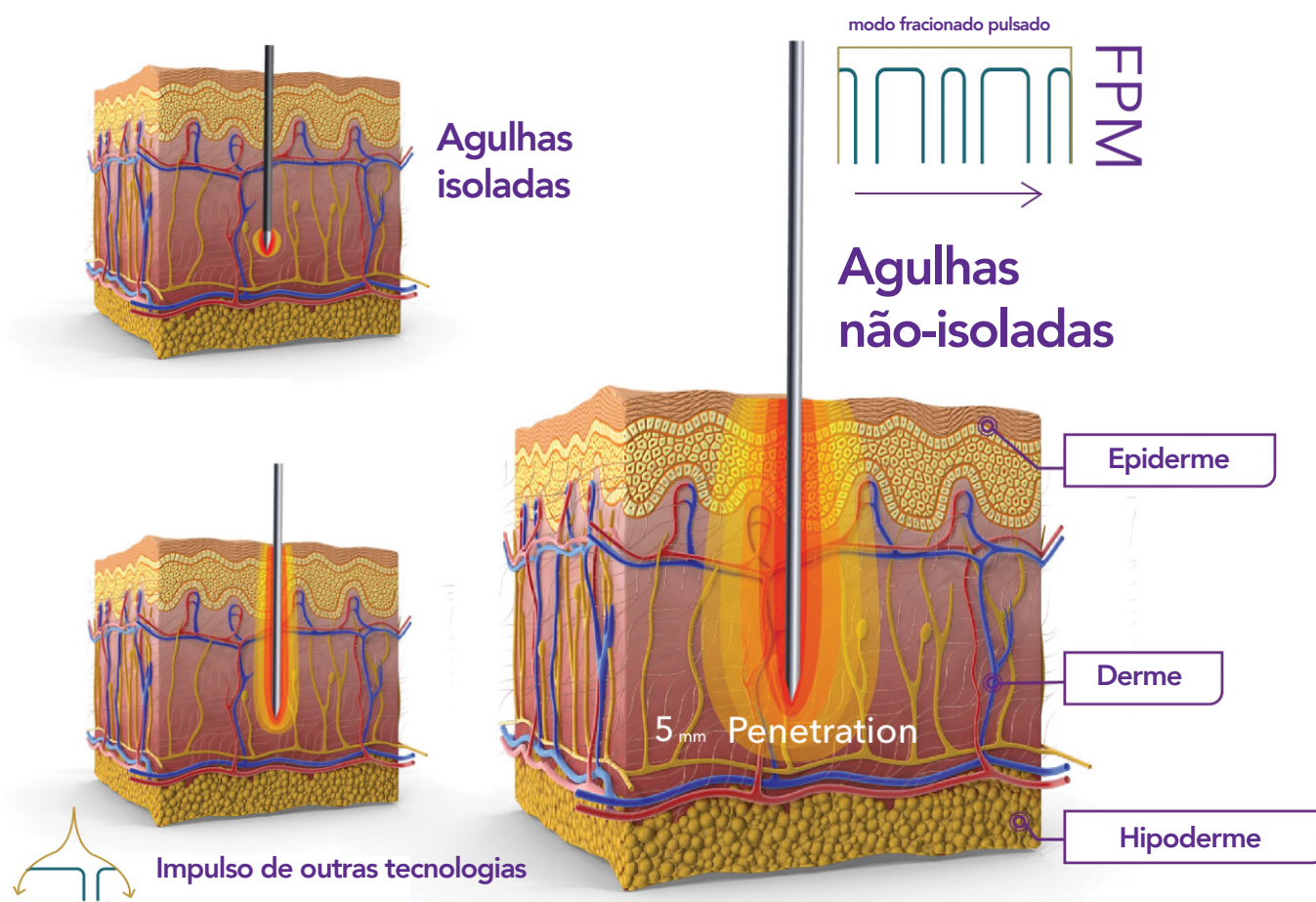

MÁXIMA ENERGIA NA ZONA ALVO

Graças à emissão energética de 6 geradores independentes, a tecnologia FPM divide cada impulso em microimpulsos homogêneos, criando uma zona de aquecimento volumétrica e uniforme ao longo de cada agulha, sem variações de intensidade.

Esse modo de operação permite realizar apenas uma passagem das microagulhas na zona tratada, ao contrário de outros métodos de lifting RF com microagulhamento, oferecendo maior eficiência no tratamento.

FSR Microablação epidérmica não invasiva com RF fracionada (Fractional Skin Resurfacing)

Único aplicador no mercado capaz de realizar microablação fracionada da epiderme, seguida de um efeito térmico (coagulativo e volumétrico) nas camadas abaixo da interface epiderme-derme.

Este processo desencadeia uma cascata de estímulos regenerativos, promovendo a melhoria da firmeza, tonicidade, suavidade e textura da pele.

Ao contrário da abrasão com laser, a ablação por RF com FSR apresenta um risco mínimo de pigmentação pós-inflamatória e requer um tempo de recuperação reduzido. Mesmo tons de pele mais escuros podem ser tratados com segurança.

Procedimentos com este manípulo requerem o uso de ponteiros estéreis descartáveis, fornecidas em pacotes de 10 unidades.



VANTAGENS

Efeitos distintos em diferentes camadas da pele, potencializando os resultados terapêuticos.

A microablação fracionada

- Reduz a espessura cutânea
- Aumenta a absorção de ativos
- Diminui as áreas de hiperpigmentação
- Uniformiza a textura epidérmica
- Revitaliza, suaviza e melhora a elasticidade
- Atenua as cicatrizes, marcas pós-acne e estrias

O aquecimento não ablativo volumétrico da derme promove:

- Neocolagénese
- Neoelastogénese
- Reorganização da matriz extracelular
- Melhoria da circulação sanguínea e oxigenação celular

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Não invasivo, sem inserção física do microeléctrodo
- Potência: até 6W
- Duração do impulso: 0,1-0,6 s
- Energia RF total: até 62 mJ/microeléctrodo
- Número de microeléctrodos na matriz: 112 unidades (8x14)
- Diâmetro do microeléctrodo: 300 µm
- Tamanho da ponteira estéril (impressão): 10x15 mm
- Espaço entre agulhas: 2 mm
- Vida útil da ponteira estéril: 450 impulsos
- Profundidade de penetração: 150 µm

APLICAÇÕES:



Rejuvenescimento




Efeito lifting imediato



Redução de ritídeas



Revitalização e uniformização cutânea

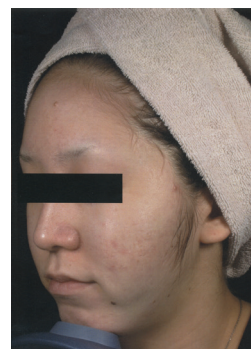

CONTOUR

O manípulo Contour, desenvolvido exclusivamente para a plataforma ENDYMED PRO, incorpora a tecnologia avançada 3DEEP com o sistema eletrônico de vácuo modulado ECMV™, proporcionando um aumento significativo no tempo e no volume de aquecimento profundo. Essa sinergia tecnológica otimiza a distribuição da energia térmica, maximizando a eficiência na redução da adiposidade localizada, indução da lipólise e remodelamento tridimensional dos tecidos corporais



COMO ATUA?

O aquecimento homogêneo e prolongado, intensificado pelo vácuo pulsado, ativa a lipólise, microcirculação e drenagem linfática, reduzindo

O estímulo térmico induz a atividade fibroblástica, promovendo neocolagênese, neoelastogênese e reorganização da matriz extracelular, melhorando a firmeza e elasticidade dérmica.

ERGONOMIA DO MANÍPULO:

- Design ergonômico com sistema de controle integrado
- Ajuste de potência da radiofrequência e do vácuo diretamente no manípulo
- Monitorização contínua da temperatura da pele no visor do manípulo
- Sensor de impedância dérmica para ajuste automático da energia emitida

BENEFÍCIOS:


- Remodelamento do contorno corporal
- Redução da celulite e da adiposidade localizada
- Remodelamento tecidual e aumento da firmeza e densidade cutânea
- Recuperação da elasticidade cutânea pós-gestação ou emagrecimento
- Ptose gravitacional severa
- Diminuição de edemas
- Melhoria da circulação linfática

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência máxima: até 85 W
- Níveis de vácuo: 5 intensidades (250 mBar – 500 mBar)
- Profundidade da absorção RF: até 26 mm
- Monitorização contínua da temperatura dérmica
- Configuração de parâmetros personalizada para a área tratada

ZONAS A TRATAR:

Regiões laterais do tronco, costas, abdômen, braços, glúteos e membros inferiores.

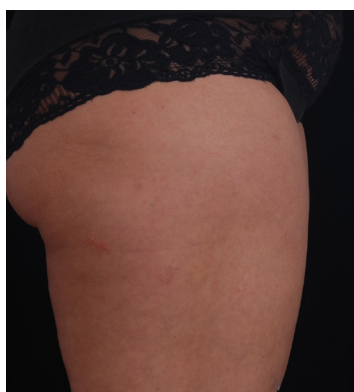


Courtesy of Endymed Clinic



Courtesy of Dr. Itzhak Vider



Courtesy of Endymed Clinic

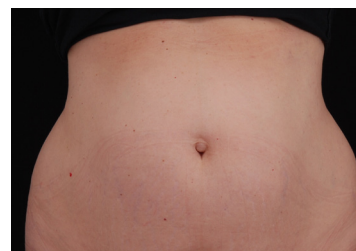

SHAPER

O manípulo SHAPER é utilizado para tratamentos intensivos corporais, permitindo a correção não invasiva e confortável da atonicidade e flacidez cutânea, independentemente da etiologia. Promove a redução e eliminação das manifestações do celulite e estimula a lipólise, favorecendo a degradação dos depósitos adiposos.

VANTAGENS:

- É o maior dos manípulos TC, com área de cobertura de até 40,7 cm²
- Equipado com sensor de impedância para ajuste automático da energia
- A ampla superfície de trabalho com 6 eletrodos circulares gera um campo eletromagnético focado, proporcionando aquecimento terapêutico rápido e profundo.
- A elevada capacidade de transmissão controlada do manípulo garante o uso eficaz e seguro da tecnologia 3DEEP

EFEITOS:

- Remodelamento tecidual e aumento da firmeza e densidade cutânea
- Redução da celulite e da adiposidade localizada
- Remodelamento do contorno corporal
- Reestruturação cutânea
- Redução de estrias



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência máxima: até 85 W (PRO); até 65W (Pure)
- Profundidade da absorção RF: até 11 mm
- Monitorização contínua da temperatura dérmica
- Configuração de parâmetros personalizada para a área tratada.



ZONAS A TRATAR:

Regiões laterais do tronco, costas, abdômen, braços, glúteos e membros inferiores.

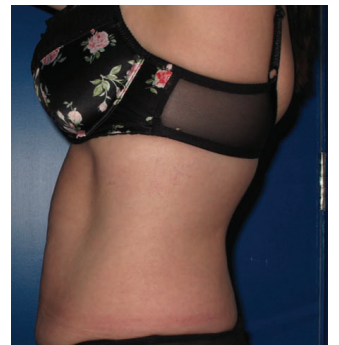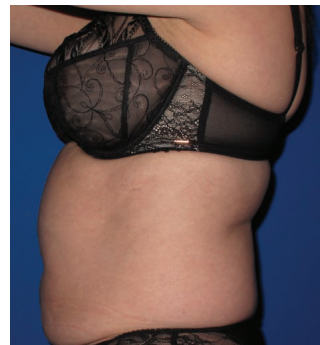

MINI SHAPER

Manípulo MINI SHAPER usado para reduzir de adiposidade localizada e a flacidez cutânea em áreas específicas: região submandibular, zona em “V” (terço inferior da face), membros superiores e joelhos entre outros.



VANTAGENS:

- O procedimento é seguro, eficaz e confortável.
- Não exige período de recuperação, nem apresenta efeitos colaterais, o que possibilita a sua realização a qualquer momento, sem comprometer as atividades diárias.

EFEITOS:


- Remodelamento tecidual e aumento da firmeza e densidade dérmica
- Efeito lifting imediato, promovendo tonificação da pele
- Redução da adiposidade localizada
- Remodelamento dos contornos faciais na região “V”
- Efeito tensor na pele dos tríceps
- Rejuvenescimento da pele nos joelhos e cotovelos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência máxima: até 85 W (PRO); até 65W (Pure)
- Profundidade da absorção RF: até 7 mm
- Monitorização contínua da temperatura dérmica
- Configuração de parâmetros personalizada para a área tratada

ZONAS A TRATAR:

Região submandibular, pescoço, decote, braços, mãos, joelhos e pés.

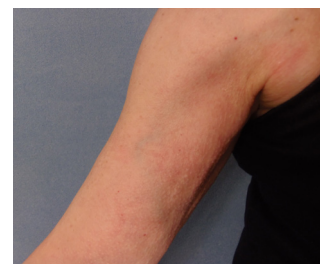

SMALL



VANTAGENS:

- O design ergonômico e o formato compacto do Manípulo SMALL garantem máxima eficácia e segurança no rejuvenescimento das áreas facial e cervical.
- O procedimento é seguro, eficaz e confortável.
- Não exige período de recuperação, nem apresenta efeitos colaterais, o que possibilita a sua realização a qualquer momento, sem comprometer as atividades diárias.

EFEITOS:



- Refirmação e lifting da pele da região média e inferior do rosto
- Correção da zona submandibular
- Rejuvenescimento da zona cervical e do decote
- Lifting cutâneo em áreas de pequenas dimensões com baixa ou inexistente gordura subcutânea

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência máxima: até 85 W (PRO); até 65W (Pure)
- Profundidade da absorção RF: até 4 mm
- Monitorização contínua da temperatura dérmica
- Configuração de parâmetros personalizada para a área tratada

ZONAS A TRATAR:

Região média e inferior do rosto, zona submandibular, pescoço, decote e dedos

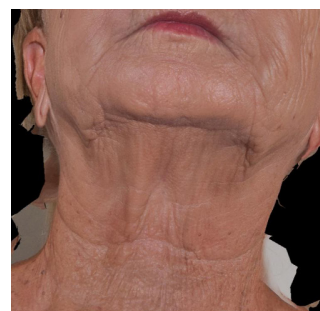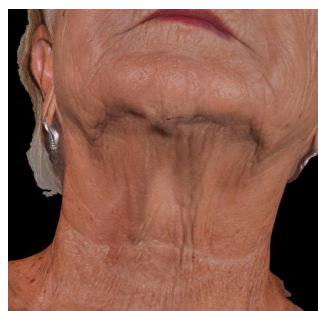

IFINE

Mais pequeno manípulo para rejuvenescimento com precisão milimétrica e segurança máxima na pele delicada das zonas periorbital e perioral.

Para otimizar a eficácia do procedimento, o iFine, tal como todos os manípulos 3DEEP, está equipado com um sensor de impedância integrado, que monitoriza continuamente a resistência cutânea do paciente, ajustando automaticamente a intensidade da energia aplicada na área tratada.



EFEITOS:



- Rejuvenescimento global na pele delicada das zonas periorbital e perioral
- Reestruturação dérmica
- Atenuação de rugas estáticas e dinâmicas
- Homeostase epidérmica
- Otimização da matriz extracelular
- Melhoria da circulação e oxigenação celular
- Redução dos sinais do stress oxidativo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência máxima: até 85 W (PRO); até 65W (Pure)
- Profundidade da absorção RF: até 1,5 mm
- Monitorização contínua da temperatura dérmica
- Configuração de parâmetros personalizada para a área tratada


ZONAS A TRATAR:

Zonas periorbital, perioral e dedos

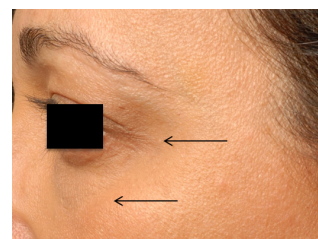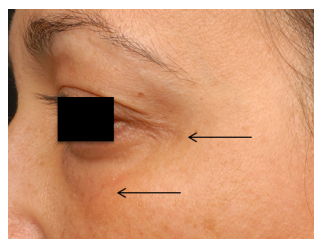

Avaliações de médicos

Principais especialistas em medicina estética

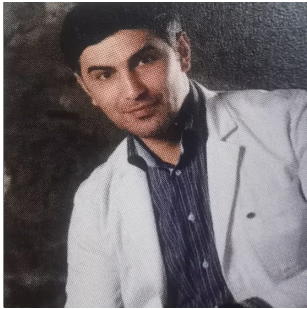

Gamidov Ainutdin Bagamaevich,
Médico Chefe, Clínica de
cirurgia plástica e cosmetologia
do Dr. Gamidov, Moscou.

"A tecnologia de microagulhas do dispositivo ENDYMED é uma combinação única de eficiência e conforto do procedimento para os pacientes. Este é um efeito pronunciado e vivido com reabilitação rápida e sem complicações



Dr. Fabián Perez Rivera
Um dos principais cirurgiões
plásticos da Argentina,
membro da ISAPS (Sociedade
Internacional de Cirurgias
Plásticas Estéticas.)

"A tecnologia 3DEEP RF da ENDYMED usa menos energia para tratar a pele com segurança e eficácia, com o mínimo de dor e tempo de recuperação. É eficaz no tratamento de vários tipos de pele, incluindo a pele Argentina que é mais morena, e passou por extensos testes clínicos.
A ENDYMED oferece soluções flexíveis com diferentes acessórios para o rosto e o corpo, permitindo que os tratamentos sejam realizados durante todo o ano. Confio nos desenvolvimentos tecnológicos do ENDYMED e posso dizer com segurança que minha decisão foi correta depois de usá-lo por um ano.



Kolieva Madina
Médico-chefe da EverEsthetic
Aesthetic Medicine Clinic,
Moscou.

"A tecnologia ENDYMED ocupa um lugar especial em nossa clínica. Este é talvez um dos dispositivos mais eficazes, que legitimamente reivindica o título de destaque da clínica. Outra vantagem é que o dispositivo pode ser equipado com vários acessórios de RF:
- agulha invasiva 3DEEP Intensif; ablativo 3DEEP FSR; não invasivo com tecnologia 3DEEP TC para aquecer a pele do rosto e do corpo.
Isso permite que o dispositivo seja usado o ano todo e ofereça serviços a diferentes categorias de pacientes de acordo com as indicações. Os procedimentos no dispositivo ENDYMED são muito apreciados pelos nossos pacientes que ficam felizes em repeti-los."

Junte-se aos melhores e seja o próximo a aproveitar
as vantagens e a eficácia exclusivas das plataformas
ENDYMED 3DEEP PRO e PURE!

ENDYMED™ | Intens

ENDYMED

3DEEP SKIN SCIENCE

45 ANOS  SORISA®

Apoio exclusivo via



sorisa.pt

Sede: Parque Oriente Rua D. Nuno Álvares Pereira, Armazém B3 2695-167 Bobadela T. 210 334 300, geral@sorisa.pt

Lisboa: Av. da República, 82-B 1600-205 Lisboa, T. 213 818 000/01, comercial@sorisa.pt

Porto: R. do Campo Alegre, 1308, 4150-174 Porto, T. 226 061 000, comercial.norte@sorisa.pt

Coimbra: Av. Fernão de Magalhães 667 – Loja C, 3000-178 Coimbra, T. 239 841 317, comercial.centro@sorisa.pt